

NORIKS Bunion Fix — correttore per alluce valgo

Riallineamento graduale dell'alluce con 30 minuti fino a 3 ore al giorno.

Taglia	Universale — adatto a tutte le misure di piede
Lato	Lo stesso correttore per il piede destro e sinistro
Imbottitura	Morbida imbottitura interna che protegge la pelle
Regolazione	Fasce elastiche con tensione regolabile
Consigliato	Da 30 minuti a 3 ore al giorno



NELLA CONFEZIONE

- 1 correttore per alluce valgo
- Fasce elastiche di regolazione


AVVIO RAPIDO

1. Posiziona il correttore in modo che il cuscinetto appoggi sulla sporgenza ossea e l'anello avvolga l'alluce.
2. Stringi la fascia solo quanto basta a sentire un lieve allungamento — mai fino al dolore.
3. La prima settimana indossalo 30 minuti al giorno, poi aumenta gradualmente.

1. Come indossarla

- 1 Siediti e appoggia il piede in modo che le dita siano rilassate.
- 2 Fai passare l'alluce nell'anello finché il cuscinetto non appoggia sulla sporgenza ossea laterale del piede.
- 3 Fai passare la fascia attorno alla parte centrale del piede e stringila solo quanto basta a sentire un lieve allungamento.
- 4 Verifica che il cuscinetto sia disteso, senza pieghe, e che la fascia non comprima il dorso del piede.
- 5 L'alluce deve essere tirato verso l'esterno, ma senza una tensione che provochi dolore.

Udobno, prilagodljivo i lako za nošenje kod kuće

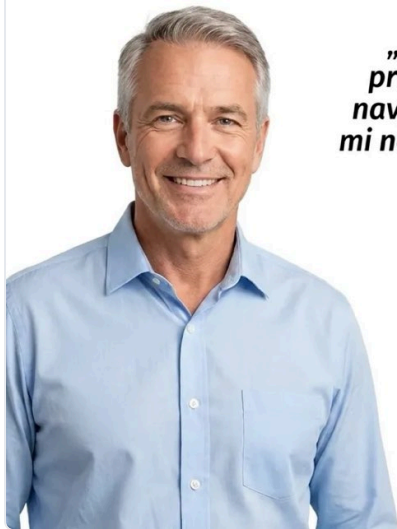

„Mekan je i lako se prilagodi. Stavim ga navečer uz TV i uopće mi ne smeta — zato ga nosim redovno.“

Marko Horvat
Korisnik Noriks Bunion Fixa



Il correttore avvolge l'alluce e alleggerisce la sporgenza ossea.

Zašto je Noriks drugačiji:



Napredna terapija poravnanja



Patentirani zglojni mehanizam



Podesimo rastezanje



Meko jastučić za čukalj



Vrhunski izdržljivi materijali



Bezbolno poravnanje

L'obiettivo è riportare gradualmente l'alluce in una posizione più corretta.

2. Piano di utilizzo

Periodo	Al giorno	Quando
1 ^a settimana	30 minuta	La sera, da seduto
2 ^a settimana	45 – 60 minuta	La sera o durante il riposo
3 ^a settimana	1 – 2 ore	Diviso in due momenti
Dalla 4 ^a settimana	2 – 3 ore	In uno o due momenti, secondo il comfort

La costanza conta più della durata. Trenta minuti tutti i giorni danno risultati migliori di tre ore una volta a settimana.

3. Che cosa aspettarsi

- Primi giorni: sensazione di allungamento e sollievo dopo aver tolto il correttore.
- Dopo circa due settimane di uso costante: meno fastidio camminando e stando in piedi.
- Dopo circa un mese: un cambiamento più visibile nella posizione dell'alluce.
- Il correttore agisce mentre lo indossi e con l'uso regolare — non è una soluzione una tantum.

4. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
Dolore mentre lo indosso	Fascia stretta troppo	Allenta la fascia; la sensazione deve essere di allungamento, mai di dolore
Il correttore scivola dall'alluce	Fascia troppo lenta o pelle umida	Asciuga il piede e stringi la fascia di un livello
Arrossamento della pelle	Piega nell'imbottitura o uso troppo prolungato all'inizio	Distendi l'imbottitura e riduci il tempo di utilizzo a 30 minuti

5. Pulizia

- Pulisci con un panno umido e sapone neutro, risciacqua e lascia asciugare all'aria.
- Non lavare in lavatrice e non asciugare sul termosifone — l'elastico perde tensione.

Non indossare il correttore su ferite aperte o pelle infiammata. In caso di diabete, ridotta sensibilità del piede o dolore forte e persistente, consulta prima il medico.

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.

NORIKS · Le istruzioni valgono per il prodotto indicato nel titolo di questo documento. Domande e cambio taglia: info@noriks.com · noriks.com/it