

## NORIKS ErgoSit — cuscino ortopedico da seduta

Intaglio per il coccige e memory foam ad alta densità per le sedute prolungate.

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Schiuma        | Memory foam OrthoFlex ad alta densità                                 |
| Certificazione | OEKO-TEX®, atossico                                                   |
| Forma          | Intaglio per il coccige, sagomatura di sostegno per fianchi e colonna |
| Fodera         | Removibile, lavabile in lavatrice                                     |
| Utilizzo       | Sedia da ufficio, auto, viaggi                                        |



### NELLA CONFEZIONE

- 1 cuscino ErgoSit
- Fodera removibile lavabile

### AVVIO RAPIDO

1. Estrai il cuscino dalla confezione e lascialo 4 – 6 ore perché la schiuma riprenda la forma piena.
2. Appoggialo sulla sedia con l'intaglio rivolto all'indietro, sotto il coccige.
3. Siediti bene indietro, con i piedi appoggiati a terra.

## 1. Prima del primo utilizzo

- Il cuscino è compresso per il trasporto — dopo averlo estratto lascialo 4 – 6 ore a temperatura ambiente perché la schiuma riprenda la forma piena.
- L'odore della schiuma nuova svanisce dopo qualche ora di areazione.


## 2. Posizionamento corretto

- 1 Appoggia il cuscino sulla seduta con l'**intaglio rivolto all'indietro** — sotto il coccige, non davanti.
- 2 La parte piatta del cuscino deve appoggiare interamente sulla seduta, senza sporgere oltre il bordo.
- 3 Siediti bene indietro, così che la schiena tocchi lo schienale.
- 4 Regola l'altezza della sedia in modo che le ginocchia siano all'altezza dei fianchi o poco più in basso e i piedi appoggino a terra.



Vozite diljem zemlje bez bolova  
**Testirali i odobrili vozači kamiona**

L'intaglio elimina la pressione diretta sul coccige.

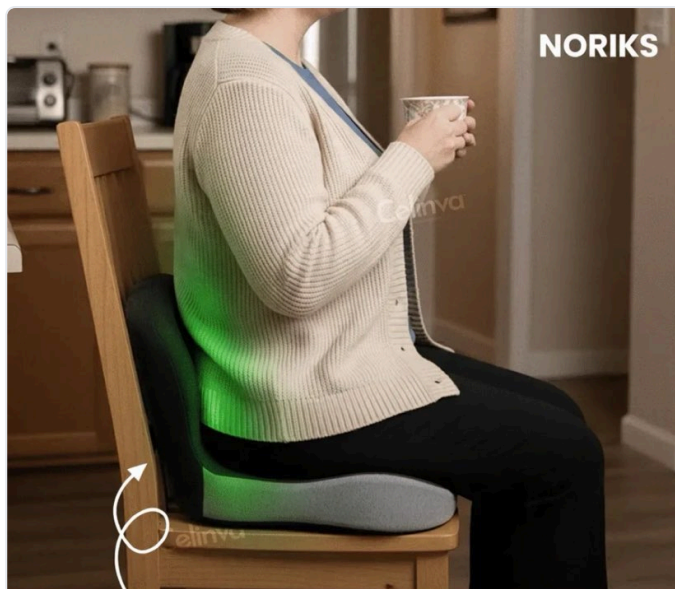

Automatski **ispravlja**  
vaše **držanje**

La forma sagomata distribuisce il peso in modo uniforme sui fianchi.

### 3. Uso quotidiano

- Il cuscino è pensato per la seduta di tutti i giorni — in ufficio, in auto e in viaggio.
- Anche con il cuscino alzati e cammina qualche minuto ogni ora.
- Non usarlo su superfici molto morbide o irregolari — il sostegno viene meno.

### 4. Risoluzione dei problemi

| Che cosa succede                                 | Causa                            | Soluzione                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il cuscino scivola sulla sedia</b>            | Rivestimento della seduta liscio | Gira la fodera con il lato antiscivolo verso il basso; sulle sedie in pelle metti sotto un sottile supporto |
| <b>La pressione sul coccige persiste</b>         | Intaglio rivolto in avanti       | Gira il cuscino — l'intaglio va all'indietro                                                                |
| <b>La schiuma sembra dura</b>                    | Ambiente freddo                  | Il memory foam si ammorbidisce a temperatura corporea in pochi minuti                                       |
| <b>Il cuscino è troppo alto per la scrivania</b> | Altezza della sedia non regolata | Abbassa la sedia dell'altezza del cuscino                                                                   |

### 5. Lavaggio e cura

- Togli la fodera e lavala in lavatrice a 30 °C, con programma delicato.
- **Non lavare mai la schiuma in lavatrice e non immergerla in acqua.** Tampona le macchie con un panno umido e lascia asciugare all'aria.
- Non asciugare la schiuma sul termosifone o alla luce diretta del sole.
- Non conservare il cuscino schiacciato sotto un peso — la schiuma mantiene la forma solo se non è compressa.

## 6. Garanzia, cambio e reso

---

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) indicando il numero d'ordine.

---

NORIKS · Le istruzioni valgono per il prodotto indicato nel titolo di questo documento. Domande e cambio taglia: [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) · [noriks.com/it](https://noriks.com/it)