


Calze a compressione NORIKS con zip

Compressione graduata 15–20 mmHg con zip laterale.

Compressione	15 – 20 mmHg, graduata (massima alla caviglia)
Zip	Zip laterale con patta interna di protezione
Taglie	S/M, L/XL, 2XL — in base alla circonferenza del polpaccio
Come indossarli	Durante il giorno, fino a 12 ore
Lavaggio	A mano in acqua fredda o programma delicato

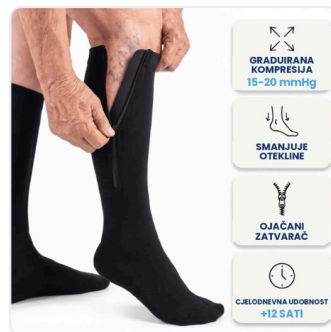

NELLA CONFEZIONE

- 1 paio di calze a compressione (secondo il pacchetto scelto)

AVVIO RAPIDO

1. Misura la circonferenza del polpaccio nel punto più largo e scegli la taglia dalla tabella.
2. Indossa le calze al mattino, da seduto, prima che le gambe si gonfino.
3. Chiudi la zip dalla caviglia verso l'alto, tenendo il tessuto aderente alla gamba.

1. Scelta della taglia

Taglia	Circonferenza del polpaccio	Numero di scarpa
S/M	23 – 36 cm	36 – 40
L/XL	36 – 45 cm	40 – 44
2XL	45 – 56 cm	44 – 48

Scegli la taglia in base alla **circonferenza del polpaccio**, non al numero di scarpa. Misura al mattino, nel punto più largo del polpaccio, a gamba rilassata. Se sei al confine tra due intervalli, prendi la taglia maggiore.

2. Come indossarle

- 1 Siediti e apri completamente la zip.
- 2 Infila la calza sul piede in modo che il tallone entri nella zona sagomata.
- 3 Distendi la calza sul polpaccio senza alcuna piega — le pieghe creano punti di pressione.
- 4 Con una mano premi il tessuto contro la gamba, così la patta di protezione resta tra zip e pelle, con l'altra chiudi lentamente la zip dalla caviglia verso l'alto.
- 5 Verifica che il bordo superiore non si arrotoli e non tagli sul ginocchio.

**VIŠE OD 5.200
ZADOVOLJNIH KUPACA**



Monika S.

"Godinama sam svake večeri imala otečene gležnjeve. Otkako nosim Noriks, ponovno su normalni. Čak mogu opet obuti cipele koje 3 godine nisam nosila. Muž kaže da opet hodam kao prije."



Verificirana recenzija

La zip facilita la vestizione senza tirare.



Compressione graduata: massima alla caviglia, più leggera verso il ginocchio.

3. Per quanto tempo indossarle

- Indossale al mattino e portale durante il giorno — fino a circa 12 ore.
- Toglile prima di dormire, salvo diversa indicazione del medico.
- In caso di lunghe stazioni in piedi, sedute prolungate o viaggi, portale per tutta la durata dell'attività.
- Nei primi giorni la compressione può sembrare insolita — inizia con 2 o 3 ore al giorno.

4. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
La zip si apre da sola	Il tessuto è tirato verso il basso oppure la circonferenza è al limite superiore	Prima di chiudere, tira la calza più in alto sul polpaccio; se si ripete, prendi la taglia maggiore
Non riesco a chiudere la zip	Taglia troppo piccola o gamba gonfia	Indossale al mattino; se anche così non va, cambia con la taglia maggiore
Formicolio, dita fredde o pallide	Compressione eccessiva o una piega che stringe	Togli subito la calza, distendila e rimettila; se si ripete, rivolgiti al medico
La calza scivola verso il basso	Circonferenza del polpaccio al limite inferiore dell'intervallo	Prendi la taglia minore
Segni rossi sulla pelle	Piega o bordo superiore troppo stretto	Distendi il tessuto; una lieve impronta della maglia è normale, un solco profondo no

5. Lavaggio e cura

- Lava a mano in acqua fredda o in lavatrice con programma delicato, con la **zip chiusa** e dentro un sacchetto a rete.
- Niente candeggina né ammorbidente — danneggiano le fibre elastiche che creano la compressione.
- Asciuga all'aria, in piano. Non in asciugatrice, sul termosifone o al sole.
- Pulisci la zip di tanto in tanto con un panno umido, così non vi restano fibre.

- Con l'uso quotidiano sostituisci il paio ogni 6 mesi circa — la compressione con il tempo si riduce.

Prima dell'uso consulta il medico se soffri di arteriopatia periferica, hai ferite aperte, infiammazione cutanea acuta, alterazioni diabetiche del piede o trombosi venosa profonda.

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.

NORIKS · Le istruzioni valgono per il prodotto indicato nel titolo di questo documento. Domande e cambio taglia: info@noriks.com · noriks.com/it